

هایساید برس

محلول ضدعفونی کننده آماده به مصرف مخصوص ابزار روتاری دندانپزشکی

هایساید برس یک محلول ضدعفونی کننده آماده به مصرف مخصوص ابزار روتاری مانند برس های الماسی، برس های کاربید، پولیش ها و ابزارهای ساخته شده از استیل است. این محصول به واسطه فرمولاسیون سریع و متعادل علاوه بر خواص آنتی میکروبیال وسیع الطیف، در حضور آلودگی های آلی بالا نیز موثر است. فرمولاسیون بدون فنل و آلدئید این محصول، از تغییر رنگ و تثبیت خون جلوگیری می کند.

مزایای مصرف

- اثربخشی آنتی میکروبیال وسیع الطیف
- فاقد آلدئید، فنول و کلر
- بدون ایجاد خوردگی و تغییر رنگ ابزار
- مناسب برای ابزار سازگار با الکل و مواد قلیایی

مشخصات محصول

رنگ / شکل	محلول شفاف بی رنگ تا زرد کم رنگ
pH	< ۱۲
بو	بوی الکی
طول عمر قفسه ای	۲۴ ماه




Special for
Infection Control
in Dental Settings


بسته بندی

۲ عدد در هر کارتن	حجم ۱۰ لیتری
۳ عدد در هر کارتن	حجم ۵ لیتری
۶ عدد در هر کارتن	حجم ۱ لیتری
۲۰ عدد در هر کارتن	حجم ۵۰۰ میلی لیتری
۳۰ عدد در هر کارتن	حجم ۲۵۰ میلی لیتری
۴۸ عدد در هر کارتن	حجم ۱۲۵ میلی لیتری

Hazard Rating

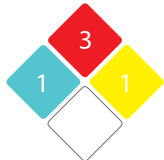

Ready-to-use	NFPA
Health	1
Flammability	3
Reactivity	1

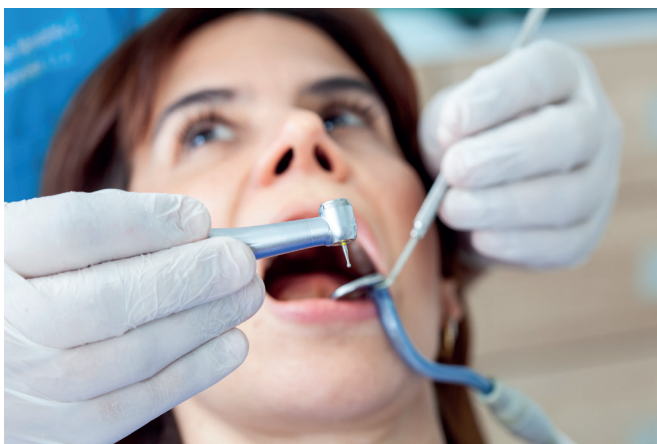

هشدار

- دور از دسترس کودکان و افراد ناآگاه قرار گیرد.
- شدیداً قابل اشتعال؛ دور از حرارت، جرقه و جریان برق با ولتاژ بالا نگهداری شود.
- بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.



Certifications

- >> ISO 9001: 2015
- >> ISO 13485: 2016
- >> GMP
- >> FSC



Middle East Office
Behban Pharmed Lotus Co.
 Address : Unit 113, 12 Floor, Bldg. B, Kaveh
 Complex, Azadi Ave., Tehran, Iran
 Tel: (+9821) 66581294-5/66581269

info@hisept.com

World Locations: Düsseldorf, Kuala Lumpur, Istanbul, Tehran, Baghdad

ترکیبات

- مقدار ترکیب (در هر ۱۰۰ گرم هاپساید برس)
- ۰/۲ گرم دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید
- ۳۲ گرم ایزوپروپیل الکل

مواد جانبی

- سورفکتانت
- عوامل قلیایی کننده
- بازدارنده خوردگی
- اسانس
- آب دیونیزه

طیف اثر میکروبی

منطبق با استانداردهای اروپایی

اثر بخشی علیه باکتری

According to EN 13727 (contact time: 1 minute)	Staphylococcus. aureus/ ATCC 6538 Escherichia. coli/ ATCC 10536 Pseudomonas. aeruginosa / ATCC 15442 Enterococcus. hirae/ ATCC 10541
According to EN 14561 (contact time: 5 minutes)	Staphylococcus. aureus/ ATCC 6538 Pseudomonas. aeruginosa / ATCC 15442 Enterococcus. hirae/ ATCC 10541

اثر بخشی علیه مخمر

According to EN 13624 (contact time: 1 minute)	Candida. albicans/ ATCC 10231
According to EN 14562 (contact time: 5 minutes)	Candida. albicans/ ATCC 10231

اثر بخشی علیه قارچ

According to EN 13624 (contact time: 1 minute)	Aspergillus. niger/ ATCC 16404
According to EN 14652 (contact time: 5 minutes)	Aspergillus. niger/ ATCC 16404

اثر بخشی علیه ویروس

According to EN 14476 (contact time: 5 minutes)	Adenovirus type 5 Herpes simplex virus (HSV-1)
---	---

روش مصرف

محلول هاپساید برس را درون ظرف ضدعفونی بریزید. ابزار روتاری را به مدت ۳ تا ۵ دقیقه در آن غوطه ور نمایید. سپس ابزار را خارج کرده و صبر کنید تا خشک شوند. برای جلوگیری از خوردگی، از غوطه وری بیش از ۳ تا ۵ دقیقه و آبکشی ابزار خودداری نمایید. ابزار را به صورت بصری چک نمایید که آلوده نباشند. در صورت وجود آلودگی، ابزار را با براش تمیز کرده و فرآیند ضدعفونی را تکرار نمایید.

سازگاری

هایساید برس مناسب برای ابزار سازگار با الکل و مواد قلیایی است. این محصول با آلومینیوم سازگار نمی باشد. برای جلوگیری از خوردگی، از آبکشی ابزار پس از ضدعفونی با هاپساید برس خودداری شود.