

هایساید ساکشن

محلول ضد عفونی کننده غلیظ مخصوص ساکشن یونیت ها

هایساید ساکشن یک محلول غلیظ برای ضد عفونی ساکشن یونیت ها، کاسه اسپیتون و جداکننده های آمالگام است. این محصول به واسطه فرمولاسیون منحصر به فرد، موثر بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم های بیماری زا می باشد. هایساید ساکشن توانایی پاک کردن باقی مانده های آلی مانند بزاق، خون، پروتئین ها و گرد و غبار دریل را از لوله های تخلیه دارد و به دلیل وجود ترکیبات بازدارنده خوردگی با اکثر مواد سازگار می باشد.

مزایای مصرف

- اثربخشی آنتی میکروبیال وسیع الطیف
- محلول غلیظ و مقرون به صرفه
- فاقد آکدهید، فنول و کلر



مشخصات محصول

رنگ / شکل	محلول شفاف بی رنگ تا زرد کم رنگ
pH	۱۰-۱۳
بو	بوی مشخصه
طول عمر قفسه ای	۲۴ ماه
حلالیت (در آب)	کاملا محلول



Special for
Infection Control
in Dental Settings

ترکیبات

- مقدار ترکیب (در هر ۱۰۰ گرم هاپساید ساکشن)
- ۱۰ گرم بنزالکانیوم کلراید

مواد جانبی

- سورفکتانت
- بازدارنده خوردگی
- حلال کمکی
- آب دیونیزه

طیف اثر میکروبی

منطبق با استانداردهای اروپایی

اثر بخشی علیه باکتری

According to EN 13727 Staphylococcus aureus/ ATCC 6538
(contact time: 10 minutes Escherichia coli/ ATCC 10536
use dilution: 2%) Pseudomonas aeruginosa / ATCC 15442
Enterococcus hirae/ ATCC 10541

According to EN 14561 Staphylococcus aureus/ ATCC 6538
(contact time: 15 minutes Pseudomonas aeruginosa / ATCC 15442
use dilution: 2%) Enterococcus hirae/ ATCC 10541

اثر بخشی علیه مخمر

According to EN 13624 Candida albicans/ ATCC 10231
(contact time: 15 minutes
use dilution: 1%)

According to EN 14562 Candida albicans/ ATCC 10231
(contact time: 15 minutes
use dilution: 2%)

اثر بخشی علیه قارچ

According to EN 13624 Aspergillus niger/ ATCC 16404
(contact time: 15 minutes
use dilution: 2%)

According to EN 14652 Aspergillus niger/ ATCC 16404
(contact time: 60 minutes
use dilution: 1%)


اثر بخشی علیه ویروس

According to EN 14476 Adenovirus type 5
(contact time: 15 minutes Herpes simplex virus (HSV-1)
use dilution: 2%)

بسته بندی

۲ عدد در هر کارتن	حجم ۱۰ لیتری
۳ عدد در هر کارتن	حجم ۵ لیتری
۶ عدد در هر کارتن	حجم ۲/۵ لیتری
۶ عدد در هر کارتن	حجم ۱ لیتری
۲۰ عدد در هر کارتن	حجم ۵۰۰ میلی لیتری
۳۰ عدد در هر کارتن	حجم ۲۵۰ میلی لیتری

Hazard Rating

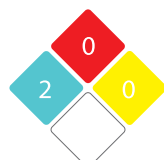

Concentrate	NFPA
Health	2
Flammability	0
Reactivity	0



هشدار

- دور از دسترس کودکان و افراد ناآگاه قرار گیرد.
- دور از حرارت، جرقه و جریان برق با ولتاژ بالا نگهداری شود.
- بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.



Certifications

- >> ISO 9001: 2015
- >> ISO 13485: 2016
- >> GMP
- >> FSC



Middle East Office
Behban Pharmed Lotus Co.
Address : Unit 113, 12 Floor, Bldg. B, Kaveh
Complex, Azadi Ave., Tehran, Iran
Tel: (+9821) 66581294-5/66581269

info@hisept.com

World Locations: Düsseldorf, Kuala Lumpur, Istanbul, Tehran, Baghdad

روش مصرف

بعد از هر جراحی و قبل از ضدعفونی، ساکشن را کاملاً آبکشی نمایید. هاپساید ساکشن باید قبل از استفاده با آب تا ۲٪ رقیق شود. ۲ لیتر از محلول رقیق شده تهیه کنید. از ۱/۵ لیتر از محلول رقیق شده برای ساکشن در هر یونیت استفاده کنید و ۵۰۰ میلی لیتر باقیمانده را در کاسه اسپیتون بریزید. پس از ۱۵ دقیقه آبکشی نمایید.

سازگاری

هاپساید ساکشن با انواع متداول ساکشن یونیت، جداکننده های آمالگام و کاسه اسپیتون سازگار است. اما با آلومینیوم، مس، استیل گالوانیزه و پلی اورتان سازگار نمی باشد.