

هایساید اس - ۵

محلول ضد عفونی غلیظ سطوح پزشکی

هایساید اس-۵ یک ضد عفونی و پاک کننده بر پایه تکنولوژی هیدروژن پراکساید فعال شده (AHP) است. این محصول به واسطه فرمولاسیون آنتی میکروبیال، موثر بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم های بیماری زا از قبیل باکتری، مخمر، قارچ و انواع ویروس های پوشش دار و بدون پوشش می باشد. علاوه، هایساید اس-۵ یک محصول مقرون به صرفه است و سازگاری خوبی را با اغلب مواد مورد استفاده در مراکز درمانی دارد. این محصول برای تمیز کردن و ضد عفونی کردن روتین سطوح توصیه می شود.


مزایای مصرف

- اثر بخشی آنتی میکروبیال وسیع الطیف
- عملکرد ضد عفونی کنندگی با قابلیت پاک کنندگی همزمان
- بدون بقایای چسبنده
- فاقد فنول، آلدئید و کلر
- سازگار با محیط زیست
- مقرون به صرفه

مشخصات محصول




رنگ / شکل	محلول شفاف بی رنگ تا زرد کم رنگ
pH	۰/۸ - ۱/۸
بو	بوی مشخصه
طول عمر قفسه ای	۱۸ ماه
انحلال پذیری (در آب)	کاملاً محلول

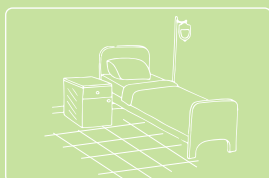

THIS IS A HISEPT PRODUCT, WITH
**HIGH-LEVEL
SAFETY &
PROTECTION**

بسته بندی

۳ عدد در هر کارتن	حجم ۵ لیتری
۶ عدد در هر کارتن	حجم ۲/۵ لیتری
۶ عدد در هر کارتن	حجم ۱ لیتری

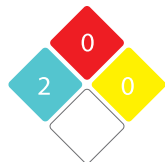

Hazard Rating

Ready-to-use	NFPA
Health	2
Flammability	0
Reactivity	0



هشدار

- دور از دسترس کودکان و افراد ناآگاه قرار گیرد.
- بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.



Certifications

- >> ISO 9001: 2015
- >> ISO 13485: 2016
- >> GMP
- >> FSC



Middle East Office
Behban Pharmed Lotus Co.
 Address : Unit 113, 12 Floor, Bldg. B, Kaveh
 Complex, Azadi Ave., Tehran, Iran
 Tel: (+9821) 66581294-5/66581269

info@hisept.com

World Locations: Düsseldorf, Kuala Lumpur, Istanbul, Tehran, Baghdad

ترکیبات

- مقدار ترکیب (در هر ۱۰۰ گرم هاپساید اس - ۵)
- ۴/۲۵ گرم هیدروژن پراکساید

مواد جانبی

- سورفکتانت ها
- پایدار کننده
- بازدارنده عوامل خوردگی
- آب دیونیزه

طیف اثر میکروبی

منطبق با استانداردهای اروپایی

اثر بخشی علیه باکتری

According to EN 13727 (contact time: 10 minutes use dilution: 2%)	Staphylococcus. aureus/ ATCC 6538 Enterococcus. hirae/ ATCC 10541 Pseudomonas. aeruginosa/ ATCC 15442
According to EN 13697 (contact time: 30 minutes use dilution: 6%)	Staphylococcus. aureus/ ATCC 6538 Enterococcus. hirae/ ATCC 10541 Pseudomonas. aeruginosa/ ATCC 15442 Escherichia. coli/ ATCC 10536

اثر بخشی علیه مخمر

According to EN 13624 (contact time: 30 minutes use dilution: 6%)	Candida. albicans/ ATCC 10231
According to EN 13697 (contact time: 30 minutes use dilution: 6%)	Candida. albicans/ ATCC 10231

اثر بخشی علیه قارچ

According to EN 13624 (contact time: 30 minutes use dilution: 6%)	Aspergillus. niger/ ATCC 16404
According to EN 13697 (contact time: 30 minutes use dilution: 6%)	Aspergillus. niger/ ATCC 16404

اثر بخشی علیه ویروس

According to EN 14476 (contact time: 15 minutes use dilution: 4%)	Herpes simplex virus (HSV-1)
(contact time: 15 minutes use dilution: 6%)	Adenovirus type 5

روش مصرف

محصول هاپساید اس-۵ را به صورت زیر با آب رقیق نمایید:

- ۶٪ - ضد عفونی کننده ویژه مراکز درمانی
- ۱٪ - ضد عفونی کننده سطوح غیر غذایی و پاک کننده عمومی
- ۵/۰٪ - ضد عفونی سطوح عمومی
- ضد عفونی کننده روتین: ۲٪/۱۵ دقیقه
- ضد عفونی کننده ویژه: ۶٪/۳۰ دقیقه

نکته: آبکشی لازم نیست مگر اینکه سطوح پوشش خاصی داشته باشد. پس از ضد عفونی سطوح در تماس با مواد غذایی آبکشی با آب شیر انجام شود. از این محصول برای ظروف شیشه ای استفاده نشود. برای استفاده بر روی سطوح با جنس پ پوشش های خاص، ابتدا بر روی قسمت کوچک استفاده و سازگاری آن تست شود.

سازگاری

هاپساید اس-۵ با انواع مواد از قبیل استیل ضد زنگ، پلی پروپیلن، مس، PVC و سیلیکون سازگار است.